

Choix de selleries  
non-feu M1  
Choice of M1 fire  
retardant upholstery

Basic

- 32 - BLEU / BLUE
- 33 - VERT / GREEN
- 34 - JAUNE / YELLOW
- 35 - ROUGE / RED
- 36 - ORANGE / ORANGE

Trendy

- 62 - AZUR / AZURE
- 63 - CEDRAI / CEDRAI
- 64 - RACIN / GRAPE
- 65 - LILAS / LILAC
- 66 - BONBON / SWEET

Classic

- 72 - MARINE / MARINE
- 93 - COTTAGE / COTTAGE
- 94 - MOSAÏQUE / MOSAÏQUE
- 95 - NEVE / FIRN
- 96 - ELKAN / IIN

Noirs

- 94 - OBOUCLE / DARKNESS
- 97 - ANTI-STATIC / ANTI-STATIC  
Non classé M1 / Not classified M1

Selleries RITZER  
RITZER upholstery  
Non classé M1.  
Not classified M1.

- C1 - NAVY
- C2 - DUSTY BLUE
- C3 - MOSS



ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT



Poids net  
Net weight 95 kg

Poids brut  
Gross weight 135 kg

Volume  
0,92 m<sup>3</sup>

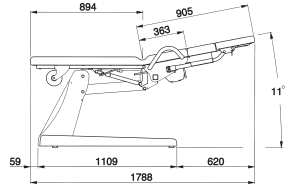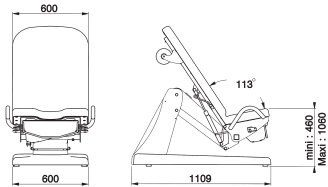

COU/FE-27111



Midmark Europe SAS  
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée  
www.promotal.com



TABLE GYNÉCOLOGIQUE ÉLECTRIQUE  
ELECTRIC GYNECOLOGICAL TABLE

ELANSA



Tous les produits PROMOTAL sont fabriqués en France. Tous les produits sont conformes aux normes CE. Les produits sont homologués par le Ministère de la Santé. Les produits sont homologués par le Ministère de la Santé. Les produits sont homologués par le Ministère de la Santé.

Version: 06-2017



# ELANSA

L'EFFICACITÉ  
ET LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION  
THE EFFICIENCY EASY TO USE

## CONFORT COMFORT

- 1 moteur électrique
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Ancrages bilatéraux pour colposcope
- Mouvement combiné de l'élevation et du dossier
- Commande au pied (commande programmable en option)
- 1 actuator
- Gas-spring assisted backrest
- Bilateral receptacle for optional colposcope holder
- Combined motion of the height and backrest
- Foot control (programmable foot control as an option)



## HYGIÈNE HYGIENE

- Sellerie anatomique sans couture monobloc
- Sellerie amovible
- Structure inox époxy sous assise
- Carters ABS sur la base
- Support rouleau papier
- Bac ABS stérilisable
- Bac coulissant et amovible
- Coussin d'assise étanche
- Roulettes à freins (option)
- Formed seamless upholstery in one piece
- Removable upholstery
- S/S epoxy coated structure under the seatrest
- ABS carter on the base
- Paper roll holder
- Sterilisable ABS bowl
- Sliding and removable bowl
- Waterproof seatrest
- Casters with brakes (option)



Modèle présenté avec options/accessoires  
Products shown with options/accessories

## SÉCURITÉ SAFETY

- Capacité 170 kg
- Position d'urgence 11°
- Capacity 170 kg
- Emergency position 11°

## ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- Décrochement de la base pour s'approcher du patient
- Possibilité de pratiquer un examen général (coussin en accessoire)
- 3 modèles pour s'adapter à toutes les pratiques (Étriers, Goepels, Repose-pieds)
- Variable height from 46 to 106 cm
- Cutout in the base for more accessibility to patient
- Versatility of the table (gynecology and general examination with the cushion as accessory)
- 3 models to adapt to various practices (Stirrups, Goepels, Footrests)



Accueil  
Welcome



Examen général  
General examination



Gynécologie  
Gynecology



Position d'urgence  
Emergency position

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm  
Mouvements combinés de l'élevation et du dossier (1 moteur)  
Inclinaison du dossier par vérin à gaz  
Commande par pédale  
Patins de réglage sous piétement  
Bac ABS stérilisable, coulissant et amovible (capacité 6 litres)  
Ancrage bilatéral pour option support colposcope  
Structure inox avec finition époxy gris nuage sous assise  
Carter ABS gris clair  
Sellerie anatomique amovible sans couture  
Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm - ø 12,5 cm)  
Poids maximum du patient autorisé 170 kg  
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)


## STANDARD FEATURES

Electric height adjustment from 46 to 106 cm  
Combined height and backrest movements (1 actuator)  
Gas-spring assisted backrest adjustment  
Foot control  
Adjustable levers under the base  
Sterilisable, sliding and removable ABS bowl (capacity 6 litres)  
Bilateral receptacle for optional colposcope holder  
Stainless steel structure, under the seatrest, with light grey epoxy finish  
Light grey ABS carter  
Removable formed seamless upholstery  
Paper roll holder (max. length 50 cm - ø 12.5 cm)  
170 kg maximum patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 210 kg and a static weight of 680 kg)

Modèles	Goepels	Étriers	Stirrups	Repose-pieds	Footrest
11614-01	●				
11610-01		●			
11615-01				●	

## Options\*

\* A demander impérativement lors de la commande.  
mountage usine /  
Plant (factory) must be  
ordered with initial order

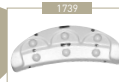


1739  
Commande par pédale  
programmable  
Programmable foot control



81036  
4 roulettes ø 5 cm avec freins  
Hauteur = 5 cm  
4 castors ø 5 cm with brakes  
(Height = 5 cm)

## Accessoires Accessories

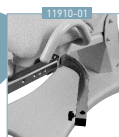

11910-01  
Support accessoire ø 16 mm  
Accessory holder ø 16 mm




Lighttec 11910-01  
Se référer à la  
documentation  
Refer to the literature



2985-01 11910-01  
Tige porte-sérum autobloquant  
2 crochets  
Auto-locking 2 hook IV pole




11272-01  
Coussin de pied amovible  
avec son support mural  
Removable leg cushion  
with wall support  
(pour/for 11610-01 & 11614-01)

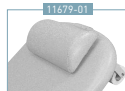

11679-01  
Appui-tête  
Headrest



11372-01  
Coussin d'obturateur  
avec support  
Fill-in cushion with support  
(pour/for 11615-01)

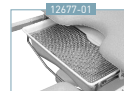

12677-01  
Grille anti-éclaboussures  
Splash guard cover



11830-01  
Support colposcope Kaps ø 30  
Kaps colposcope holder ø 30



11840-01  
Support colposcope Zeiss ø 38  
Zeiss colposcope holder ø 38



11810-01  
Support colposcope Leisegang  
Leisegang colposcope holder

D'autres modèles  
de supports colposcopes  
sur demande  
Other colposcope holders  
available on request