




DUPONT

*Des produits à vivre*

*Un ensemble complet  
pour faire face  
à toutes les situations*

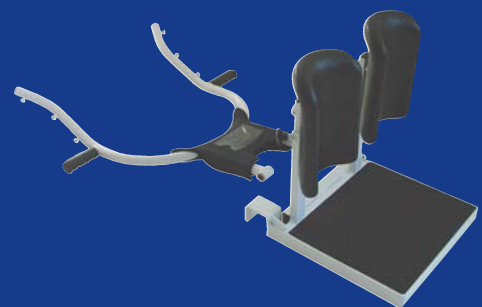

*Kit de transformation  
en Mini ALTIS*

**Gamme de lève-personnes**

**SAMERY** 

[www.dupont-medical.com](http://www.dupont-medical.com)



Sauf pack batterie et télécommande




Descente d'urgence manuelle

Palonnier équipé de 4 attaches anti-retour de sangle

Grande stabilité et maniabilité parfaite, grâce à l'écartement ajustable de la base et à la qualité des roulettes

Hauteur de la base de 11.5 cm, permettant un passage sous tous les lits du marché

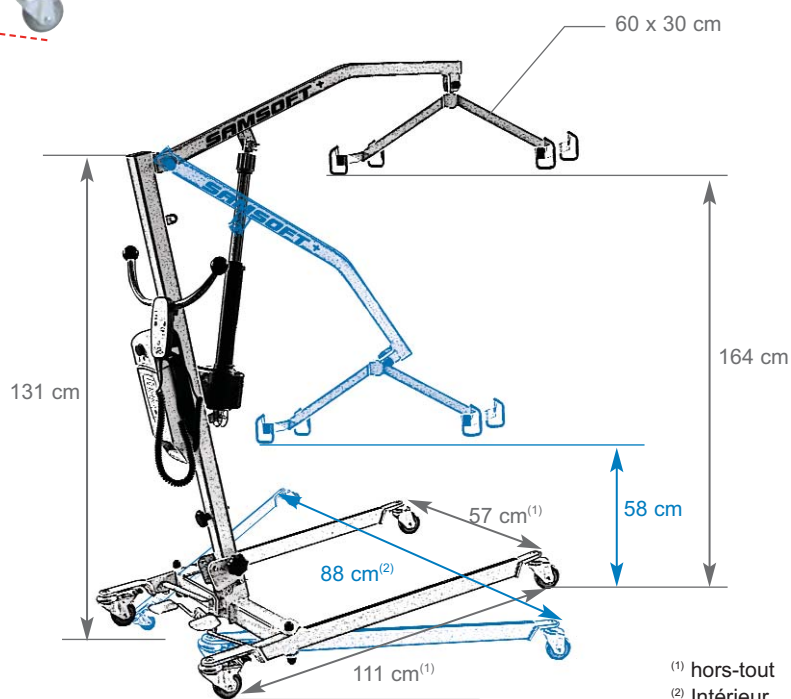

<sup>(1)</sup> hors-tout  
<sup>(2)</sup> Intérieur




Pliage sans aucun outil. Compact, tous les composants étant bloqués en position repliée, l'appareil est ainsi aisément transportable.

# DUPONT MEDICAL innove avec la Mini structure transformable


en *Mini Samsoft* ou en *Mini Altis*

Un complément judicieux aux lève-personnes standard.

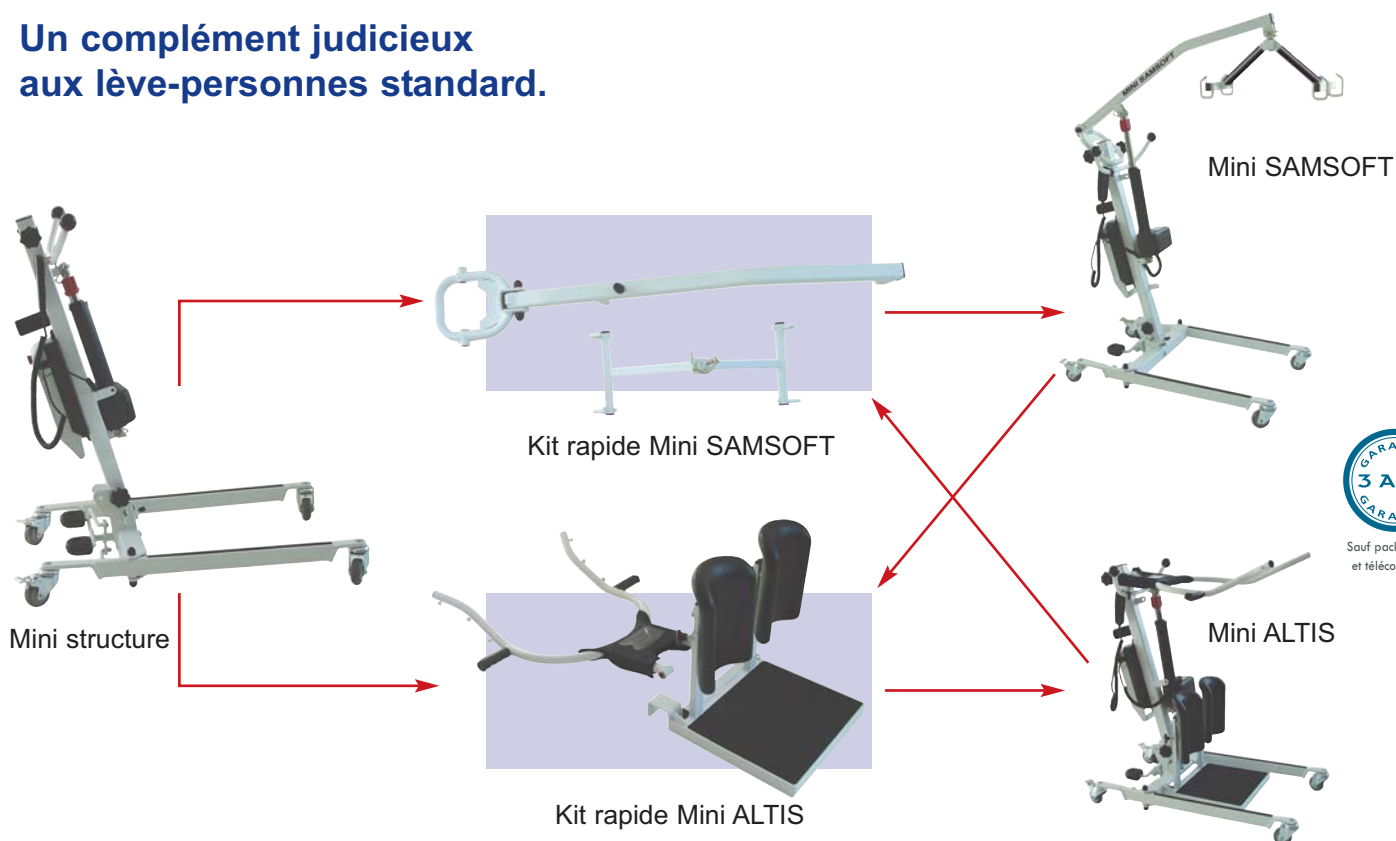


Sauf pack batterie et télécommande


Mini Samssoft plié

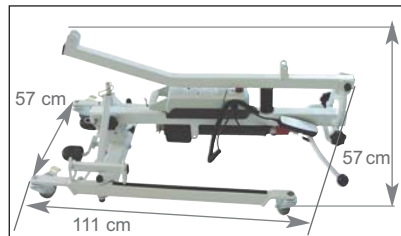

Mini Altis plié

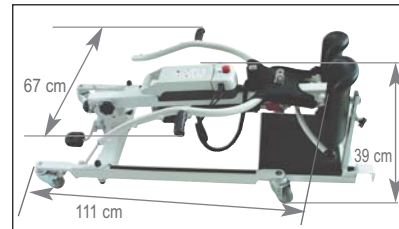


**Changez de fonction en un tour de main grâce aux kits rapides et pliez-les tout aussi rapidement !**

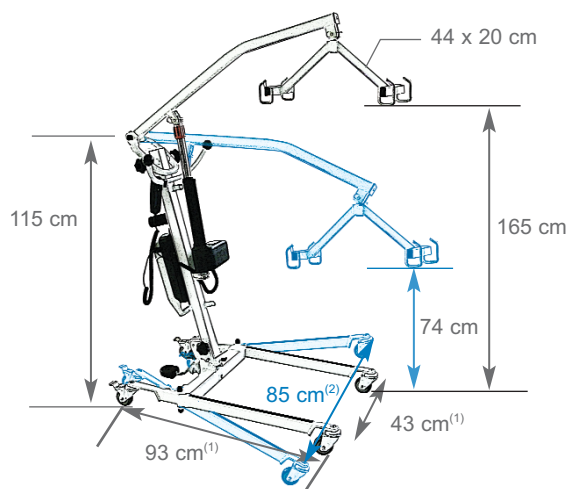

Grande compacité de la base, pliée ou dépliée

Grâce à la double articulation du mini Samsoft, la hauteur de levage est identique à un lève-personne standard et la position du centre de gravité de l'ensemble permet d'assurer la stabilité (le palonnier ne dépasse pas la surface au sol de la base)

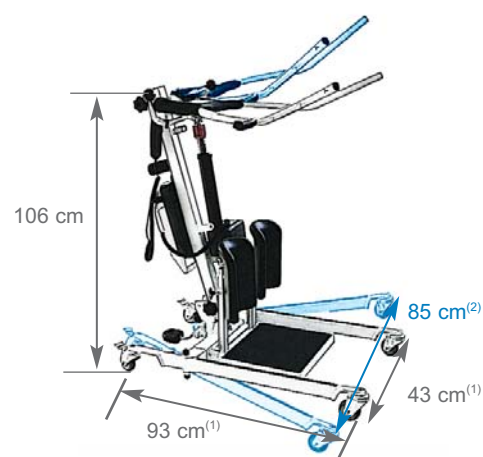

<sup>(1)</sup> hors-tout  
<sup>(2)</sup> Intérieur

# ALTIS +

*Une aide précieuse et sécurisante pour les réseaux de soins.  
Pour atteindre la station verticale sans effort et sans risque !*



Sauf pack batterie et télécommande



Appui tibial articulé et réglable en hauteur

Plateau repose-pieds large et sécurisant

3 ancrages différents pour la sangle lombaire, selon le gabarit du patient et la vitesse souhaitée du transfert.



ALTIS+ replié

Pliage sans aucun outil.  
Transport aisé.

Grande stabilité et maniabilité parfaite, grâce à l'écartement ajustable de la base et à la qualité des roulettes

Hauteur de la base de 11.5 cm, permettant un passage sous tous les lits du marché

## UN ENSEMBLE ALIMENTATION / VERIN COMMUN AUX 4 APPAREILS



Chargeur intégré dans cet ensemble compact, esthétique et fonctionnel.

Arrêt d'urgence


Descente électrique d'urgence



batterie amovible



chargeur externe mural supplémentaire en option

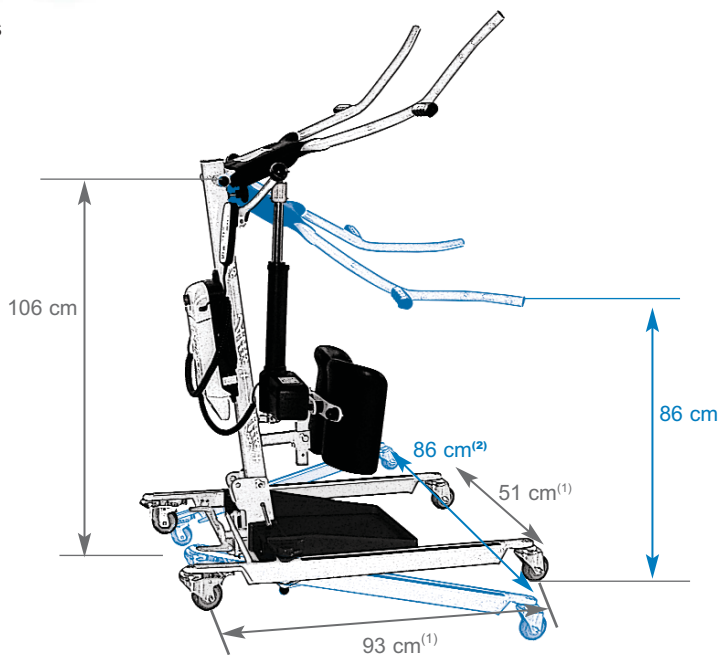













(1) hors-tout  
(2) Intérieur



# Gamme de sangles et options disponibles

## SANGLES
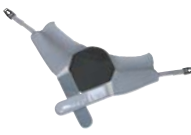
| Désignation          | Taille        | Descriptif  | Référence  | Destination   |
|----------------------|---------------|---|------------|---|
| Filet bain           | Médium        |    | SA 6390100 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight   |
| Filet bain           | Large         |    | SA 6390110 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight   |
| Polyester confort    | Médium        |    | SA 6390200 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight   |
| Polyester confort    | Large         |    | SA 6390210 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight   |
| Confort anatomique   | Médium        |    | SR 3402000 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight   |
| Confort anatomique   | Large         |   | SR 3403000 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight<br>Ou autres lève-personnes avec palonnier 4 points |
| Confort intégral     | Médium        |   | SR 3502000 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight   |
| Confort intégral     | Large         |  | SR 3503000 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight<br>Ou autres lève-personnes avec palonnier 4 points |
| Hamac filet bain     | Taille unique |  | SA 6390500 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight<br>Ou autres lève-personnes avec palonnier 4 points |
| Hamac filet toilette | Taille unique |  | SA 6390600 | Samsoft +, Mini Samsoft, Samlight<br>Ou autres lève-personnes avec palonnier 4 points |
| Lombaire             | Médium        |  | SA 6420000 | Altis +, Mini Altis   |
| Lombaire             | Large         |  | SR 4001110 | Altis +, Mini Altis   |

Voir documentation spécifique aux sangles pour plus de détails.

## KIT

Kit Mini SAMSOFT  
SA 6350500




## PESEE

Non Classe III  
SA 630 0100



Kit Mini ALTIS  
SA 6450500

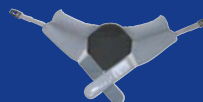

# Gamme de lève-personnes

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### ALTIS + (réf. SA 641 0000)

|   |  |
|---|--|
| Capacité de levage :                          | 150 kg   |
| Largeur entre poignées (bras de levage) :     | 69 cm  |
| Hauteur châssis (niveau poignées à pousser) : | 106 cm   |
| Largeur châssis (hors-tout) :                 | 67 cm  |
| Longueur châssis (hors-tout) :                | 93 cm  |
| Hauteur de la base :                          | 11.5 cm  |
| Ecartement intérieur des pieds :              | 51 à 86 cm   |
| Hauteur plié :                                | 34 cm  |
| Longueur plié :                               | 110 cm   |
| Vérin 8000N :                                 | débrayable anti-écrasement / équipé d'une bague de descente d'urgence manuelle |
| Boîtier d'alimentation :                      | 24 Volts / Arrêt d'urgence   |
| Télécommande 1 fonction :                     | montée / descente  |
| Autonomie (montée / descente) :               | 40 cycles (avec une charge de 100kg)   |
| Structure :                                   | acier  |
| Revêtement :                                  | époxy gris   |
| 2 roues avant :                               | Ø 75 mm  |
| 2 roues arrière à freins :                    | Ø 75 mm  |
| Poids net de l'appareil :                     | 43.50 kg   |
| Poids brut de l'appareil :                    | 48 kg  |
| Appui tibial :                                | Réglage en hauteur souple et articulé  |
| Normes :                                      | NF-EN-ISO 10535 - IP 55  |
| Marquage                                      | CE   |

### SAMSOF + (réf. SA 632 0000)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Capacité de levage :               | 150 kg   |
| Largeur châssis (hors-tout) :      | 70 cm  |
| Longueur châssis (hors-tout) :     | 111 cm   |
| Hauteur maxi (sol/base crochets) : | 164 cm   |
| Hauteur mini (sol/base crochets) : | 58 cm  |
| Hauteur de la base :               | 11.5 cm  |
| Ecartement intérieur des pieds :   | 57 à 88 cm   |
| Hauteur plié :                     | 40 cm  |
| Longueur plié :                    | 138 cm   |
| Vérin 8000N :                      | débrayable anti-écrasement / équipé d'une bague de descente d'urgence manuelle |
| Boîtier d'alimentation :           | 24 Volts / Arrêt d'urgence   |
| Télécommande 1 fonction :          | montée / descente  |
| Autonomie (montée / descente) :    | 40 cycles (avec une charge de 100kg)   |
| Structure :                        | acier  |
| Revêtement :                       | époxy gris   |
| 2 roues avant :                    | Ø 75 mm  |
| 2 roues arrière à freins :         | Ø 75 mm  |
| Poids net de l'appareil :          | 41.50 kg   |
| Poids brut de l'appareil :         | 45.50 kg   |
| Normes :                           | NF-EN-ISO 10535 - IP 55  |
| Marquage                           | CE   |

### Mini ALTIS (réf. SA 645 0000)

|   |  |
|---|--|
| Capacité de levage :                          | 150 kg   |
| Largeur entre poignées (bras de levage) :     | 67 cm  |
| Hauteur châssis (niveau poignées à pousser) : | 106 cm   |
| Largeur châssis (hors-tout) :                 | 59 cm  |
| Longueur châssis (hors-tout) :                | 93 cm  |
| Hauteur de la base :                          | 11.5 cm  |
| Ecartement de la base :                       | 43 à 85 cm   |
| Ecartement intérieur des pieds :              | 43 à 85 cm   |
| Hauteur plié :                                | 39 cm  |
| Longueur plié :                               | 111 cm   |
| Vérin 8000N :                                 | débrayable anti-écrasement / équipé d'une bague de descente d'urgence manuelle |
| Boîtier d'alimentation :                      | 24 Volts / Arrêt d'urgence   |
| Télécommande 1 fonction :                     | montée / descente  |
| Autonomie (montée / descente) :               | 40 cycles (avec une charge de 100kg)   |
| Structure :                                   | acier  |
| Revêtement :                                  | époxy gris   |
| 2 roues avant :                               | Ø 75 mm  |
| 2 roues arrière à freins :                    | Ø 75 mm  |
| Poids de l'appareil :                         | 43 kg  |
| Appui tibial :                                | Réglage en hauteur   |
| Normes :                                      | NF-EN-ISO 10535 - IP 55  |
| Marquage                                      | CE   |

### Mini SAMSOF + (réf. SA 635 0000)

|   |  |
|---|--|
| Capacité de levage :                    | 150 kg   |
| Largeur châssis (hors-tout) :           | 59 cm  |
| Longueur châssis (hors-tout) :          | 93 cm  |
| Hauteur de levage (sol/base crochets) : | 74 à 165 cm  |
| Hauteur de la base :                    | 11.5 cm  |
| Ecartement intérieur des pieds :        | 43 à 85 cm   |
| Hauteur plié :                          | 57 cm  |
| Longueur plié :                         | 111 cm   |
| Vérin 8000N :                           | débrayable anti-écrasement / équipé d'une bague de descente d'urgence manuelle |
| Boîtier d'alimentation :                | 24 Volts / Arrêt d'urgence   |
| Télécommande 1 fonction :               | montée / descente  |
| Autonomie (montée / descente) :         | 40 cycles (avec une charge de 100kg)   |
| Structure :                             | acier  |
| Revêtement :                            | époxy gris   |
| 2 roues avant :                         | Ø 75 mm  |
| 2 roues arrière à freins :              | Ø 75 mm  |
| Poids de l'appareil :                   | 40 kg  |
| Normes :                                | NF-EN-ISO 10535 - IP 55  |
| Marquage                                | CE   |

**SAMERY**®  
DUPONT

Distribué par :

**DUPONT MEDICAL**

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92, rue du train à Fil

54390 FROUARD

Tel. 03 83 495 495 - Fax 03 83 495 496

<http://www.dupont-medical.com>

Toutes les photos sont non contractuelles  
et certains composants peuvent évoluer  
pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

S 026 0706 2