


big ben®

 **Riester**

The familiar way

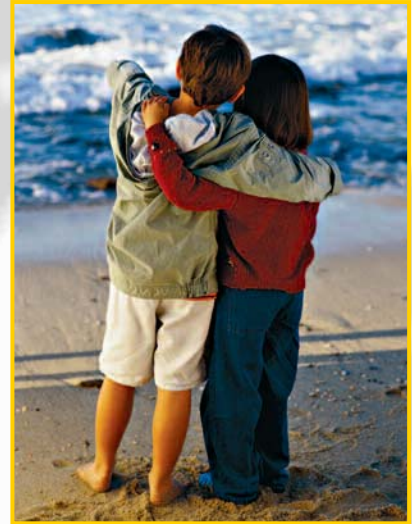

**Toute une vie
de précision.**



Tensiomètres anéroïdes

big ben®

big ben® ronde ou carrée – quatre façons de mieux vivre le travail quotidien.

C'est la véritable qualité Riester : des tensiomètres à aiguille de très grande valeur qui font la différence en raison de leur rapport prix/rendement intéressant. Les tensiomètres big ben® sont particulièrement grands et stables ; ils s'intègrent aisément dans l'univers exigeant du cabinet médical ou de la clinique. L'esthétisme et les couleurs raffinées de tous les modèles (de table, mural, sur trépied et d'anesthésie), qu'ils soient ronds ou carrés, créent une ambiance agréable pour les médecins et les patients. Tous les appareils sont disponibles en option sans latex (veuillez indiquer LF pour « sans latex »). L'offre de Riester comporte en outre un grand choix de tailles de manchons différentes.

- Cadran généreux (Ø 147,2 mm ou □ 145,5 mm) ; graduation dont le bon effet de contraste assure une lisibilité optimale ; échelle graduée jusqu'à 300 mm Hg
- Corbeille spacieuse au dos de l'appareil pour les tuyaux et le manchon
- Poire en latex pour le gonflage du manchon
- Soupape de purge inusable et réglable avec précision
- Microfiltre de protection de la soupape de purge et du système de mesure
- Membrane très résistante au vieillissement, en cuivre-béryllium spécialement durci et supportant une pression de 600 mm Hg au maximum
- Ouvrage de précision monté sur une entretoise spéciale, pour garantir la stabilité absolue du système de mesure et du point zéro
- Aucune détermination du point zéro
- Tolérance d'erreur maximale : +/- 3 mm Hg



La fixation de l'ouvrage de précision sur une entretoise métallique stable et les membranes anéroïdes de grande taille garantissent que la position zéro de l'aiguille est sûre.

big ben®

Modèles de table

Les **modèles de table** big ben® sont des auxiliaires fiables et flexibles dans le quotidien animé du cabinet médical. **Avec socle solide.** Également **disponibles sans latex** (veuillez indiquer LF pour « sans latex »)



Le raccord de tuyau chromé permet de changer rapidement de manchon.



Tuyau spiralé extensible jusqu'à 3 m.



Poire en latex et soupape de purge de précision.

big ben® Modèles de table

Manchon enroulable pour adultes
Manchon à crochet pour adultes
Manchon à fermeture velcro pour adultes
Manchon à fermeture velcro pour bras forts
Manchon à fermeture velcro pour enfants
Manomètre seul, avec socle de table, sans accessoire

Ø 147,2 mm, 2 tuyaux

No.1451
No.1452
No.1453
No.1453-123
No.1453-130
No.1453-100


□ 145,5 mm, 2 tuyaux

No.1454
No.1455
No.1456
No.1456-123
No.1456-130
No.1456-100

big ben®

Modèles muraux

Les **modèles muraux** big ben® sont appréciés dans le quotidien exigeant de la clinique. Avec **support mural très stable en plastique renforcé fibre de verre et boîtier extrêmement robuste en plastique ABS**. Rayon de pivotement de 130 degrés au total ; 65 degrés vers la gauche et la droite. Vis et chevilles fournis. Conversion facile en modèle d'anesthésie big ben®, au moyen de la pince universelle. Également disponibles sans latex (veuillez indiquer LF pour « sans latex »).

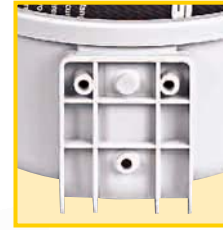

Support mural en plastique ABS renforcé fibre de verre : stable comme l'acier.

big ben® Modèles muraux

Manchon enroulable pour adultes
Manchon à crochet pour adultes
Manchon à fermeture velcro pour adultes
Manchon à fermeture velcro pour bras forts
Manchon à fermeture velcro pour enfants
Manomètre seul, avec socle de table, sans accessoire

Pour conversion en modèle d'anesthésie:

Pince universelle pour fixation à un rail
Support mural 2 trous, 2 vis fournies

Ø 147,2 mm, 2 tuyaux

No.1457

No.1458

No.1459

No.1459-123

No.1459-130

No.1459-100

□ 145,5 mm, 2 tuyaux

No.1463

No.1464

No.1465

No.1465-123

No.1465-130

No.1465-100

No.10384

No.54665

big ben®

Modèles d'anesthésie

Les **modèles d'anesthésie** big ben® sont des auxiliaires fiables et flexibles. La pince universelle fournit une **installation rapide et stable** sur tous les modèles de rails courants dans tous les services. Rayon de pivotement de 130 degrés au total ; 65 degrés vers la gauche et la droite. **Conversion facile en modèle mural**, grâce au support mural. Également disponibles sans latex (veuillez indiquer LF pour « sans latex »).



Fixation rapide sur tout rail courant à l'aide de la pince universelle.

big ben® Modèles d'anesthésie

Manchon enroulable pour adultes
Manchon à crochet pour adultes
Manchon à fermeture velcro pour adultes
Manchon à fermeture velcro pour bras forts
Manchon à fermeture velcro pour enfants
Manomètre seul, avec support de rail, sans accessoire

Pour conversion en modèle mural:

Pince universelle pour fixation à un rail
Support mural 3 trous, 3 vis fournies

Ø 147,2 mm, 2 tuyaux

No.1486

No.1487

No.1488

No.1488-123

No.1488-130

No.1488-100

□ 145,5 mm, 2 tuyaux

No.1493

No.1494

No.1498

No.1498-123

No.1498-130

No.1498-100

No.10384

No.54663

big ben®


Modèles sur trépied

Les **modèles sur trépied** big ben® sont d'une stabilité à toute épreuve. Au choix avec un statif de 38 cm de diamètre en revêtement pulvérisé (inoxydable) ou un statif de 55 cm de diamètre en **acier inoxydable particulièrement résistant**. Deux roues bloquantes sur le statif de 55 cm de diamètre. Hauteur réglable de 0,86 m à 1,12 m. Également **disponibles sans latex** (veuillez indiquer LF pour « sans latex »).




Riester

The familiar way

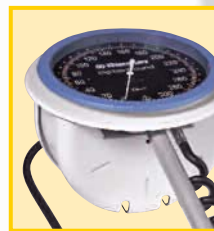

Corbeille de manchon en ABS robuste.

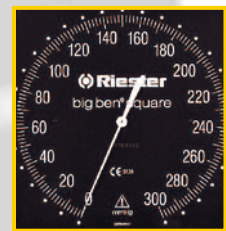

Aiguille bien visible sur le cadran facile à lire.

big ben® Modèles sur trépied

Taille du statif

Manchon enroulable pour adultes

Manchon à crochet pour adultes

Manchon à fermeture velcro pour adultes

Manchon à fermeture velcro pour bras forts

Manchon à fermeture velcro pour enfants

Ø 147,2 mm, 2 tuyaux

Ø 38

No.1466

No.1467

No.1468

No.1468-123

No.1468-130

Ø 55

No.1473

No.1474

No.1475

No.1475-123

No.1475-130

□ 145,5 mm, 2 tuyaux

Ø 38

No.1476

No.1477

No.1478

No.1478-123

No.1478-130

Ø 55

No.1483

No.1484

No.1485

No.1485-123

No.1485-130

Manomètre seul, sans statif, Manchon à fermeture velcro pour adultes

No.1468-500

No.1478-500

Rudolf Riester GmbH

P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen

Tel.: +49 (0)74 77/92 70 -0

Fax: +49 (0)74 77/92 70 -70

info@riester.de

www.riester.de