




El Estetoscopio Electrónico Elite

con tecnología SensorTech™



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Escuche los sonidos relevantes y elimine el ruido innecesario.

Electrónico Elite – El fonendoscopio de alta tecnología con una calidad acústica excelente.

Al contrario de los estetoscopios mecánicos y electrónicos tradicionales, el Estetoscopio Electrónico Elite le ofrece recogida precisa del sonido, minimizando la vibración, resonancia y pérdida de sonido. Esto facilita la detección de los soplos diastólicos de baja intensidad y los sonidos pulmonares agudos que quizás no oiría con otros fonendoscopios.

Características

- > El botón de filtro de dos posiciones le permite seleccionar entre rango de frecuencias altas o bajas
- > Las olivas y los auriculares binaurales ajustables garantizan la comodidad durante todo el día
- > Cómodo de llevar alrededor del cuello o en el bolsillo
- > Un año de garantía
- > Pila de iones de litio de larga duración (hasta 140 horas)




5079-405

SensorTech™

La tecnología que convierte los fonendoscopios convencionales en instrumentos obsoletos.

Nuestra tecnología patentada SensorTech ha mejorado el proceso de registro, transmisión y amplificación de las ondas sonoras. El sensor detecta los sonidos del organismo sin enviar ninguna señal o energía al cuerpo del paciente. Además, los filtros de frecuencia predefinida del fonendoscopio facilitan la audición de los distintos tipos de sonidos que pueden mejorar su capacidad de diagnóstico. Situado en el centro de la pieza torácica del fonendoscopio para reducir el ruido ambiental, el sensor es un componente de reducidas dimensiones pero lo bastante potente como para detectar la señal más débil, incluso a través de una gruesa capa de tejido adiposo y de la ropa.

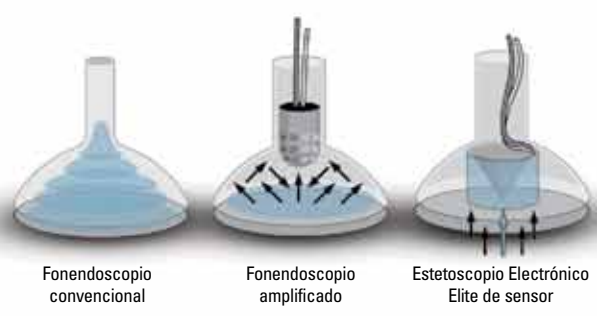

Fonendoscopio convencional

Fonendoscopio amplificado

Estetoscopio Electrónico Elite de sensor

Colocación del transductor
La superficie de posicionamiento del Elite Electrónico elimina la pérdida de sonido.

Escuche, vea y aprenda con el Estetoscopio Electrónico Elite.

Añada estas características innovadoras y aumente su habilidad de auscultación todavía más.



5079-430

El software Analyzer

– almacena y analiza los sonidos detectados directamente en el PC.

El Analyzer no sólo le permite enviar y recibir archivos de sonido en cualquier lugar, sino que además le permite descargar los archivos para archivarlos dentro de la carpeta de registros electrónicos del paciente para volver a escucharlos y analizarlos cuando más le convenga.

El software combina un fonocardiograma con una señal de ECG sincronizada para poder documentar resultados anómalos o monitorizar la afección de un paciente con el tiempo.

5079-414



5079-401

El sistema Distributor – permite conectar varios fonendoscopios para impartir formación en la cabecera del paciente.

Con la opción Distributor, nuestro distribuidor de sonidos, podrá conectar varios auriculares para una audición en grupo. El Distributor le permite a usted y a cuatro compañeros (o estudiantes) escuchar los sonidos del cuerpo del paciente al mismo tiempo – permitiendo a cada usuario revisar la condición del paciente en el acto. Es la forma más rápida y fácil de enseñar a estudiantes y residentes técnicas de auscultación y diagnóstico físico.

Especificaciones

MODOS DE ESCUCHA	frecuencias altas (modo diafragma) o bajas (modo campana)
INTERVALO DE FRECUENCIAS	20 - 20.000 Hz
DURACIÓN DE LAS PILAS	1 año
GARANTÍA	1 año
LONGITUD DEL TUBO	45,7 cm
CONTROL DEL VOLUMEN	15 - 90 dB
BOTÓN DE APAGADO/ENCENDIDO	función de temporizador: 3 minutos
DISTRIBUTOR	opcional
ANALYZER	opcional
LIMPIEZA	algodón/clorhexidina
ALERGIA	no contiene látex

Información de pedido

ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO DE WELCH ALLYN (CON TUBO DE 46cm)	5079-405
ELITE DISTRIBUTOR	5079-401
CABLE PARA DISTRIBUTOR	5079-413
AURICULARES ELITE (PARA USAR CON EL DISTRIBUTOR)	5079-414
BATERÍA DE LITIO DE 3 V CR123A PARA ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ELITE	5079-425
TAPA DE LA BATERÍA PARA ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ELITE	5079-426
OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ELITE	5079-427
SOFTWARE ELITE ANALYZER CON ECG	5079-430

Welch Allyn Iberia
General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
Tel: +34 912 990 376 Fax: +34 914 252 679
www.welchallyn.es

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™