

AUDIOBLUE

SANTÉ AU TRAVAIL



AUDIOMÈTRE



AUDIOMÈTRE
SANS FIL



TECHNOLOGIE
BLUETOOTH

L'**AudioBlue** a été conçu spécialement pour les services de santé dans le cadre du **dépistage et de l'aptitude au travail**.

L'appareil se connecte à votre ordinateur grâce à la norme **Bluetooth**.

Vous pouvez piloter le test à distance via le **logiciel intuitif Otowin**.

Le logiciel vous permet aussi de consulter votre **base de données**, créer des fiches patient, exporter des données et les imprimer.



UN FONCTIONNEMENT INTUITIF

Étape 1 : Appairage


Pas de Bluetooth ? Grâce à sa connectivité USB Plug and Play, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel ordinateur

Étape 2 : Mesure

Lancez la mesure via le logiciel Otowin. Validez manuellement la réponse patient ou utilisez le bouton réponse sans fil

Étape 3 : Recharge de la batterie

Sa journée d'autonomie et sa charge rapide (jusqu'à 80 % en seulement 20 mn) vous permettent de ne jamais être à court de batterie

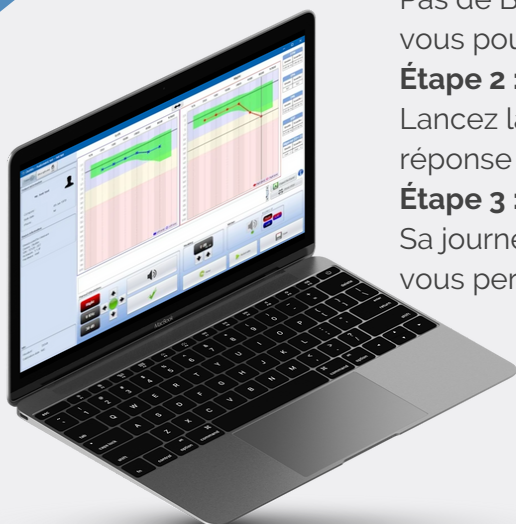

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesures d'audiométrie tonale aérienne :

Son : continu ou pulsé

Intensités : de -10 à 110 dB

Fréquences : de 125 à 8000 Hz

Masquage controlatéral bicanal

Mode manuel, semi-automatique ou automatique

Appareil :

Alimentation : batterie lithium, 4 heures de mesures en continu. Se recharge avec le câble USB et l'adaptateur secteur fournis 55mn pour une charge complète, jusqu'à 80 % en 20 mn

Connexion : norme Bluetooth et USB

Poids : 600 g

Garantie : 2 ans pièces et main d'œuvre

LOGICIEL

Logiciel gratuit fourni avec l'appareil :


Téléchargement gratuit des mises à jour sur Internet (nouveau, améliorations...)

Tutoriels vidéo disponibles pour vous aider à installer le logiciel et à effectuer les mesures

Effectuez et consultez vos mesures facilement grâce à une interface intuitive

Imprimez vos résultats ou **exportez-les** au format PDF

Gérez votre base de données de patients

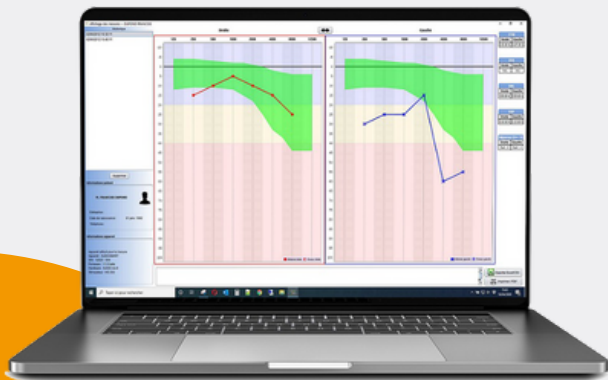

Audiomètre
Audioblu



Bouton réponse
patient sans fil



Câble USB et
adaptateur secteur



Clé USB avec le
logiciel OTOWIN



Sacoche de
transport



Pour plus d'informations, contacter :

PLANÈTE MÉDICALE

Tél : 05 61 32 84 30

Fax : 05 31 61 64 42

contact@planetemedicale.com

www.planetemedicale.com

