

Work happily

DATA
SHEET

V1.0

naggura'swop






naggura.com

Swop 4 Pro Hydro Physio

  Physiotherapy



Dimensions

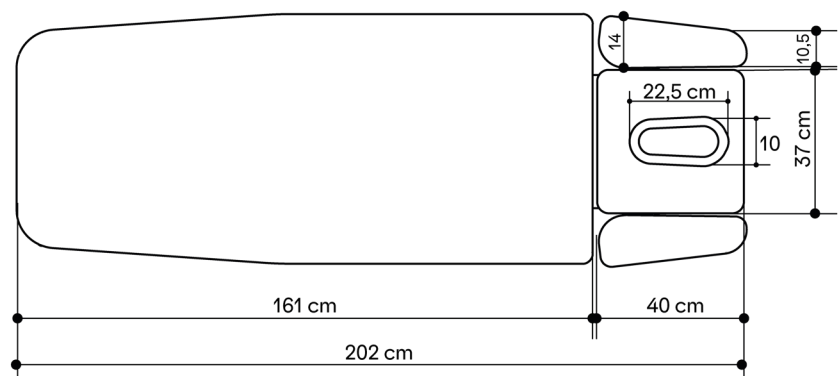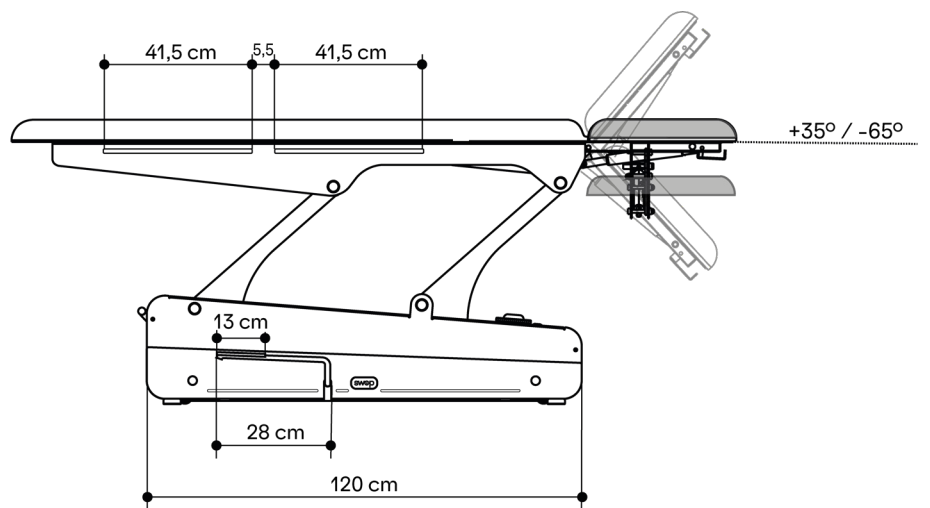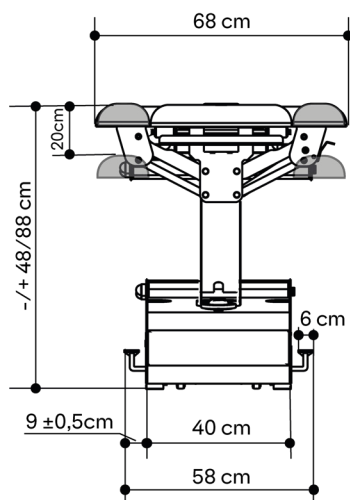

Swop 4 Pro Hydro Physio



General Specifications

DIMENSIONS (LENGTH X WIDTH)
202 x 68 cm

HEIGHT (MIN. AND MAX.)
48/88 cm

WEIGHT
95,5 kg

LIFTING CAPACITY
200 kg

FRAME COLOUR
Levers are RAL 7015
Base Frame is RAL 7047

PRODUCT CLASSIFICATION
Class I Equipment

APPLIED PARTS
Type B

MOISTURE RESISTENCE
IPx0

Operation

Head section with 2 gas springs. Twinlift

2 levers, one in each side of the base, to control height. Press the lever to bring the table up and pull up the lever to bring it down.

4 wheels turning 360°. Fully integrated system underneath the base frame. 1 Central lever.

LED light with a recharging power bank. USB Micro feeder cable included.

Upholstery

Thickness: 5cm

Density: 40kg/m³

Breathing hole and plug.

Seamless upholstery with round edges.

Naggura Skin upholstery: 100% vinyl compound.

Protection against germs and UV rays.

Superior abrasion resistance: >250K cycles.

Flame retardancy: NF P 92-503/M2

Colour: Graphite

Warranty and conformity

WARRANTY

2 years on table and upholstery

CONFORMITY

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Accessories

Paper roll holder



Bamboo Sound System



Bed Covers



Pack School

- 2 wooden tables (39,5 x 60 cm)
- 2 metal storage cradles for the tables
- 4 protective corners






Swop 4 Pro Hydro Physio



Physiotherapy



Dimensiones

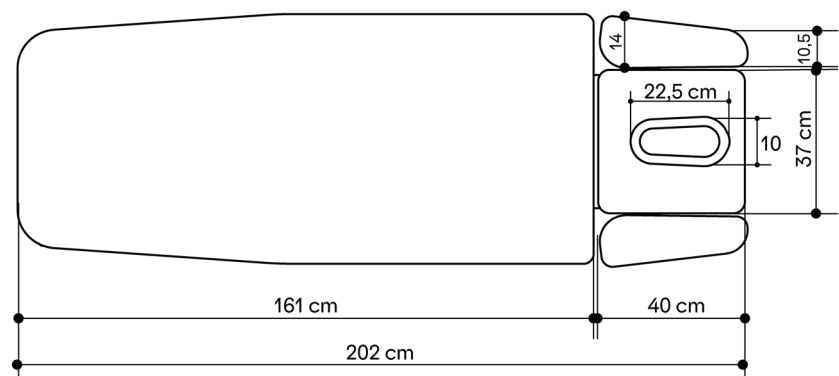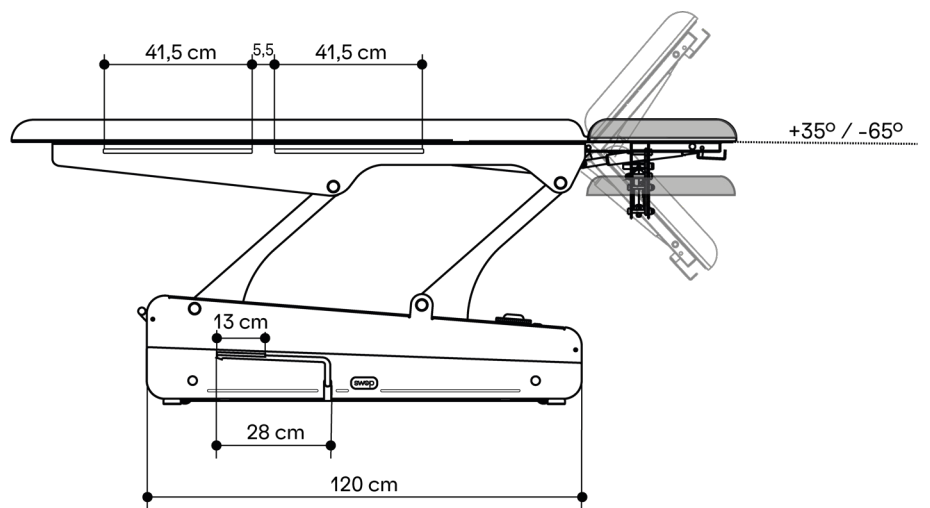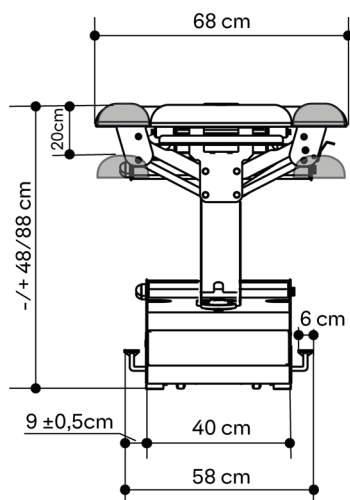

Swop 4 Pro Hydro Physio



Características técnicas

DIMENSIONES (LARGOxANCHO)
202 x 68 cm

ALTURA (MIN. Y MAX.)
48/88 cm

PESO
95,5 kg

CAPACIDAD DE CARGA
200 kg

COLOR DE LA ESTRUCTURA
Palancas: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

CLASIFICACIÓN PRODUCTO
Equipamiento Clase I

TIPO DE COMPONENTE
Tipo B

RESISTENCIA HUMEDAD
IPx0

Funcionalidades

Cabezal con dos pistones. Twinlift.

2 palancas, una en cada lado de la base, para regular la altura. Apretar para subir la camilla, y tirar para bajarla.

4 ruedas con giro 360°. Sistema completamente integrado bajo la estructura de la base accionado con una palanca.

Luz LED con batería recargable. Cable USB Micro incluido.

Portarrollos de papel.

Tapizados

Espesor: 5cm

Densidad: 40kg/m³

Agujero y cojín facial.

Borde redondeado sin costuras.

Tapizado con Naggura Skin: 100% Mezcla de vinilo.

Protección contra gérmenes y rayos UV.

Resistencia superior a la abrasión: >250K ciclos.

Protección ignífuga: NF P 92-503/M2

Color: Grafito

Garantía y conformidad

GARANTÍA

2 años (camilla y tapizado)

CONFORMIDAD

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Accesorios

Bamboo Sound System



Funda de protección



Pack School

- 2 mesas de madera (39,5 x 60 cm)
- 2 estructuras metálicas para cajones
- 4 esquinas protectoras






Swop 4 Pro Hydro Physio

  Physiotherapy



Dimensions

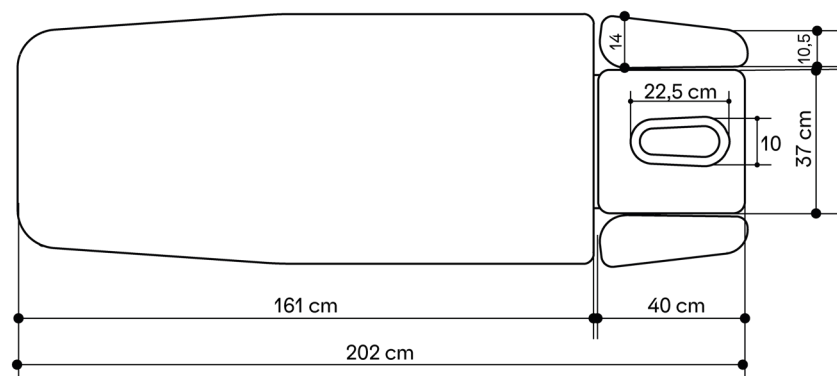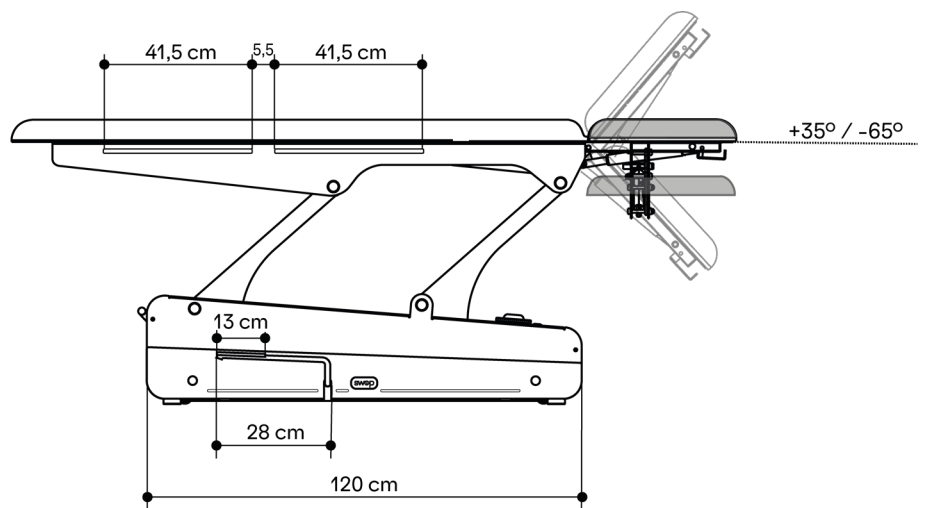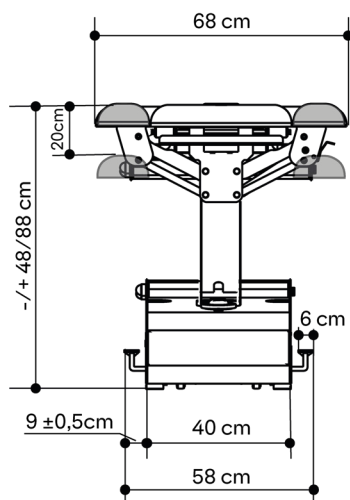

Swop 4 Pro Hydro Physio



Spécifications Générales

DIMENSIONS (LONGUEUR-LARGEUR)
202 x 68 cm

HAUTEUR (MIN. ET MAX.)
48/88 cm

POIDS
95,5 kg

CAPACITÉ DE CHARGE
200 kg

COULEUR DU CADRE
Leviers: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

CLASSIFICATION DU PRODUIT
Équipement de classe I

PARTIES APPLIQUÉES
Type B

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
IPx0

Fonctionnement

Tête avec 2 vérins à gaz. Twinlift.

2 leviers, un à chaque côté de la base, pour régler la hauteur. Poussez le levier pour faire monter la table et tirez-le pour la faire descendre.

4 roues 360°, entièrement intégrées au châssis, et 1 levier permettent de lever la table sur les 4 roues

Système d'éclairage LED rechargeable par batterie Power Bank. Câble d'alimentation USB compris.

Porte-rouleau.

Revêtement

Épaisseur: 5cm

Densité: 40kg/m³

Trou visage et bouchon amovible.

Revêtement sans coutures et bords arrondis.

Revêtement avec Naggura Skin : 100% composé de vinyle. Protection contre germes et rayons UV.

Résistance supérieure à l'abrasion: >250K cycles.

Résistance à la flamme : NF P 92-503/M2

Couleur : Graphite

Garantie et conformité

GARANTIE

2 ans sur la table et le revêtement

CONFORMITÉ

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Accessoires

Bamboo Sound System



Housse de protection



Pack School

- 2 petites tables en bois (39,5 x 60 cm)
- 2 parties tiroir métalliques
- 4 protections pour les angles de la table






Swop 4 Pro Hydro Physio

  Physiotherapy



Dimensioni

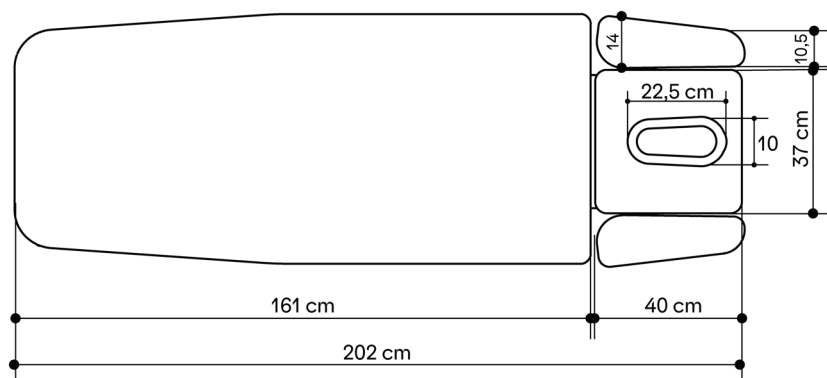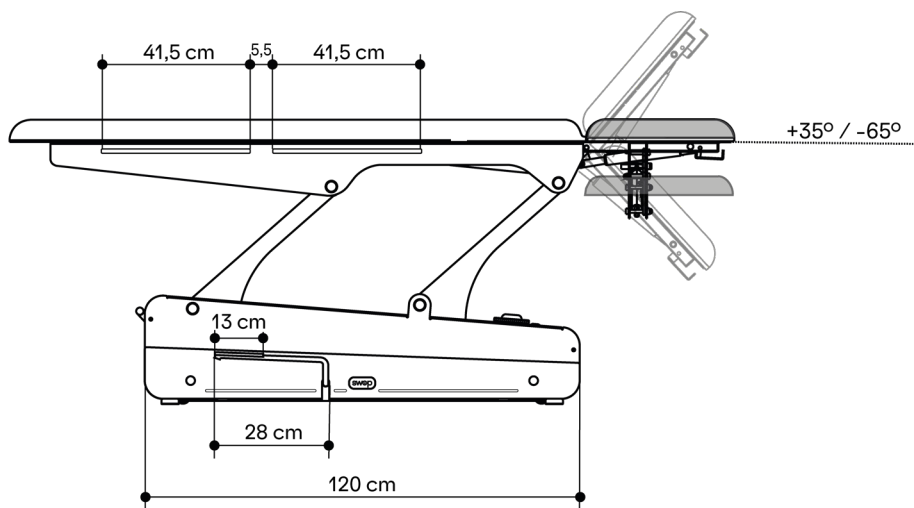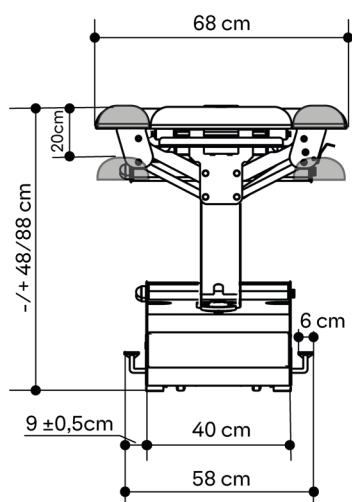

Swop 4 Pro Hydro Physio



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI (LUNGHEZZA-LARGHEZZA)
202 x 68 cm

ALTEZZA (MINIMA E MASSIMA)
48/88 cm

PESO
95,5 kg

CAPACITÀ DI CARICO
200 kg

COLORE DEL TELAIO
Leve: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO
Prodotto di Classe I

PARTI APPLICATE
Tipo B

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ
IPx0

Funzionalità

Testiera dotata di 2 pistoncini a gas.
Twinlift.

2 leve, una per ogni lato della base, per regolare
l'altezza. Premere per alzare il lettino e tirare per
abbassarlo.

4 ruote a 360° completamente integrate nel telaio. 1
leva solleva il lettino sulle sue 4 ruote.

Luce LED con batteria ricaricabile. Cavo USB Micro
incluso.

Portarotoli.

Imbottiture

Spessore: 5cm

Densità: 40kg/m³

Foro e cuscinetto facciale

Bordo arrotondato senza cuciture.

Rivestimento Naggura Skin: 100% Mix vinilico.

Protezione contro germi e raggi UV.

Resistenza superiore all'abrasione. > 250K

Resistenza alla fiamma: NF P 92-503 / M2

Colore: Grafite

Garanzia e conformità

GARANZIA

2 anni sul lettino e il rivestimento

CONFORMITÀ

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,

EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,

EN ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,

EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,

EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Accessori

Bamboo Sound System



Coprilettini



Pack School

- 2 tavolini in legno (39,5 x 60 cm)
- 2 strutture metalliche per i cassetti
- 4 protettori per gli angoli del lettino






Swop 4 Pro Hydro Physio

  Physiotherapy



Abmessungen

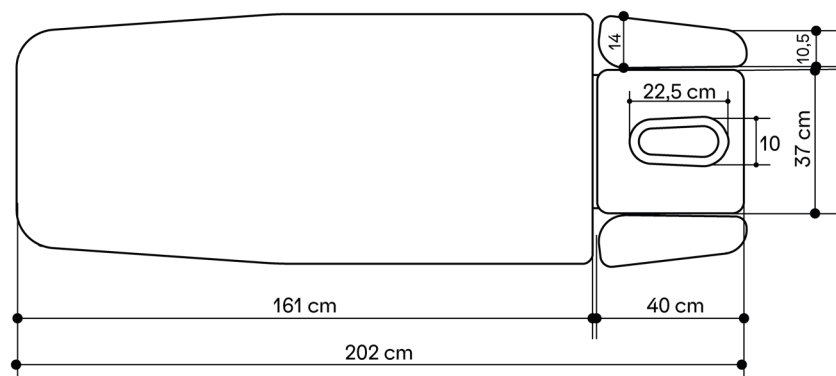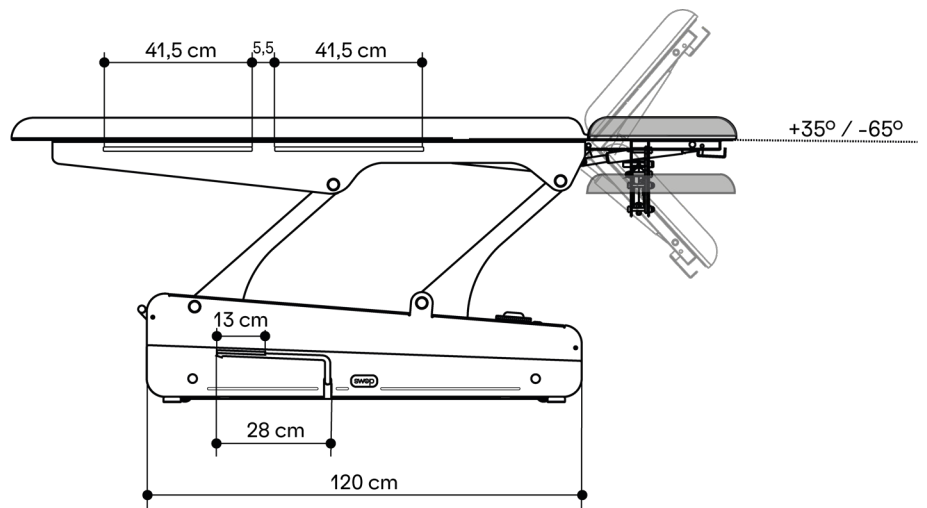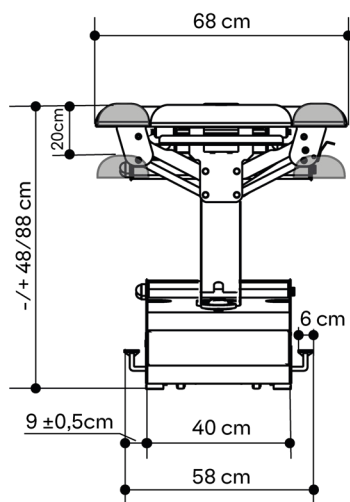

Swop 4 Pro Hydro Physio



Technische Angaben

ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE)
202 x 68 cm

HÖHE (MIN. UND MAX.)
48/88 cm

GEWICHT
95,5 kg

BELASTBARKEIT
200 kg

RAHMENFARBE
Levers are RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

GERÄTEKLASSIFIKATION
Klasse I Equipment

ANGESCHLOSSENE TEILE
Typ B

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
IPx0

Funktionen

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität. Twinlift.

Zur Höhenverstellung ist die Liege beidseitig mit einen Fußhebel ausgestattet. Durch pumpen des Fußhebel, bewegen sie die Liege hoch und runter.

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar.

LED-Beleuchtung mit eingebauter, aufladbarer Batterie. USB-Micro-Ladekabel-inklusive.

Polster

Liegenfläche: 5cm

Dicker polsterung: 40kg/m³

Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen

Nahtlose und abgerundete Polster

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung.

Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.

Hochwertige Abriebfestigkeit: >250K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2

Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE

2 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,

EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,

EN ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,

EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,

EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Zubehör

Papierrollenhalter



Bamboo Sound System



Frotteebezüge



Schülerausstattung

- 2 ausziehbare Arbeitsunterlagen (39,5 x 60 cm)

- 2 Metallgehäuse unter dem Polster um die Arbeitsunterlagen einzuschieben

- 4 Kantenschutz






Swop 4 Pro Hydro Physio



Physiotherapy



Afmetingen en instelmogelijkheden

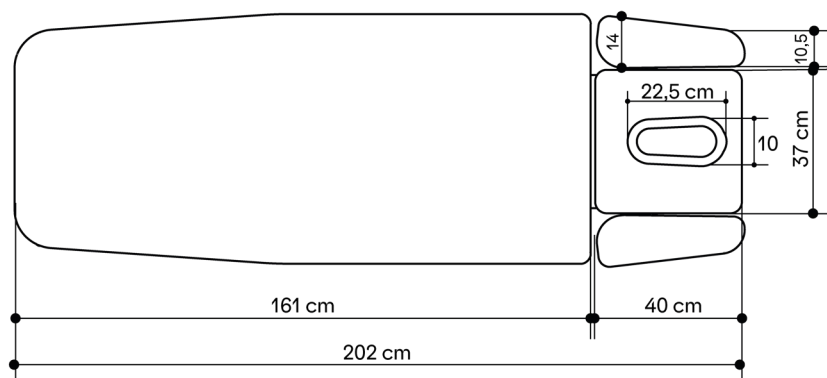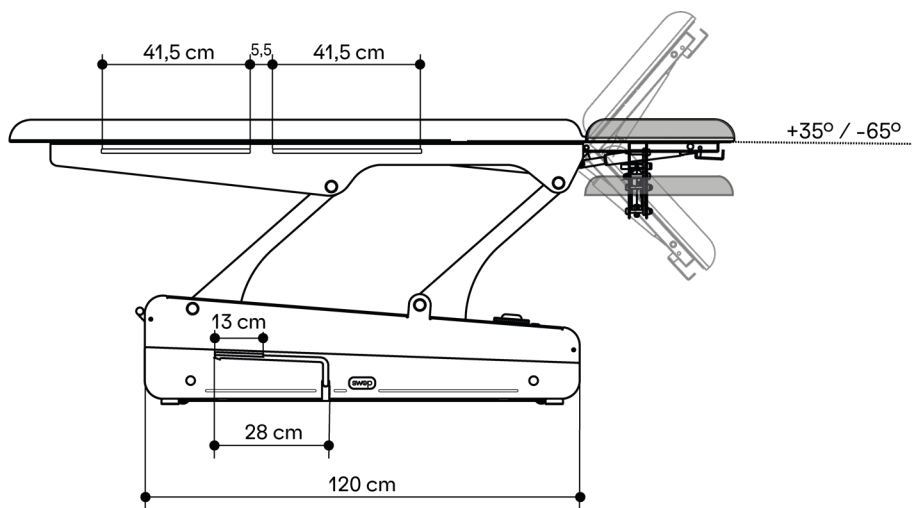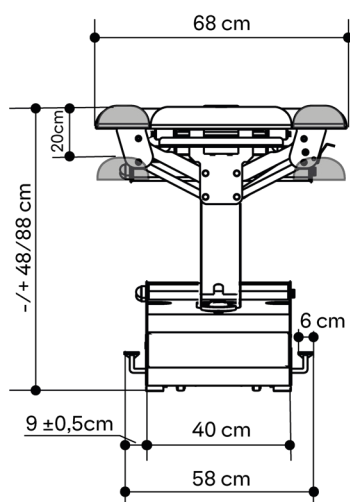

Swop 4 Pro Hydro Physio



Algemene Specificaties

AFMETINGEN (LENGTE-BREEDTE)
202 x 68 cm

HOOGTE (MIN. AND MAX.)
48/88 cm

GEWICHT
95,5 kg

MAXIMALE DYNAMISCHE
BELASTING 200 kg

KLEUR VAN HET FRAME
Voetpedalen: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

PRODUKT KLASSE
Klasse I apparaat

AANGEBRACHTE ONDERDELEN
Type B

VOCHTBESTEDIGHEID
IPx0

Uitrusting

Het hoofddeel heeft 2 gasveren voor optimale stabiliteit. Twinlift.

Aan beide zijden van de tafel bevindt zit een voetpedaal om de hoogte in te stellen. Pomp de hendel omlaag en de tafel gaat naar boven. Duw de hendel omhoog en de tafel gaat naar beneden.

Wielmechanisme met 4 wielen, centraal te bedienen, onzichtbaar in het onderstel geïntegreerd.

LED verlichting met ingebouwde oplaadbare batterij. USB micro laadsnoer meegeleverd.

Kussens

Dikte: 5cm

Polstering: 40kg/m³

Neusopening met uitneembaar gezichtskussen.

Kussens zonder naad met afgeronde hoeken.

Naggura Skin bekleding: 100% vinyl samenstelling.

Beschermt tegen bacteriën en UV stralen.

Superieure slijtagebestendigheid: >250K Martindale score.

Vlamvertragend: NF P 92-503/M2

Kleur: Graphite

Garantie en conformiteit

GARANTIE

2 jaar op bank en kunstleer

CONFORMITEIT

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,

EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,

EN ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,

EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,

EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Toebehoren

Papierrolhouder



Bamboo Sound System



Hoezen



Pack School

- 2 houten uitneembare werkbladen (39,5 x 60 cm)
- 2 metalen opbergunits voor de werkbladen
- 4 bumpers ter bescherming van de kussens

