



Photo avec Sellerie Type SERENITY

Fauteuil ORL
Gamme OREA
OREA-HVE

CARINA
Medical




DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ORL à hauteur variable électrique, 3 parties, sur patins réglables
- Commande : Pédale ou télécommande manuelle
- Equipé d'une tête à réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
- Equipé de 2 accoudoirs escamotables
- Dossier réglable par vérin à gaz synchronisé avec la jambière et le repose-pieds
- Position de Trendelenburg
- Sellerie SERENITY - certifiée non-feu, classement M1
- Piétement mécano-soudé en acier peint époxy, coloris gris clair (Ral 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55 cm ou largeur 65 cm
- Hauteur variable à partir de 48 à 88 cm
- Capacité de charge en dynamique :
150 Kg avec dossier à gaz
200 Kg avec dossier et jambière électrique

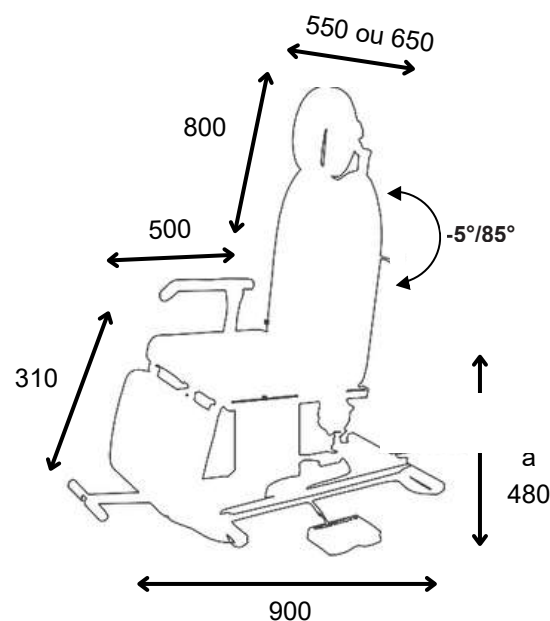

Tête à réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL



ACCESSOIRES

ACC 514-ASSISE
ACC 514-JAMBIERE

Protection plastique pour assise ou jambière



ACC 993
Supportroulettes escamotables diam. 50mm

Vous aimerez aussi :

- Réf. **OREA-HF** : Hauteur Fixe
Réf. **OREA-HVH1** : Hauteur Hydraulique sur socle chromé
Réf. **OREA-HVH2** : Hauteur Hydraulique sur patins réglables



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Revêtement : Sellerie Gamme GINKGO






COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme est proposée en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

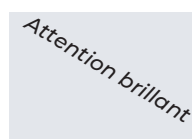

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS - FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49

Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com